

ベールロック膝継手(17B23=K)

ユーザーの操作性と膝の安定性を考えた装具用の膝継手です。
音がなく、ズボンを挟み込むことがない構造です。

完成用部品認可製品


特徴

- ロック解除レバーまたはケーブルリリースでの簡単ロック解除操作
- 膝関節伸展位での自動ロック機構
- 内側カーブ付で高いフィットリング性を実現
- 膝軸後方オフセットによる安全設計
- ステンレス製ならではの高い耐久性

ケーブルリリース



手動

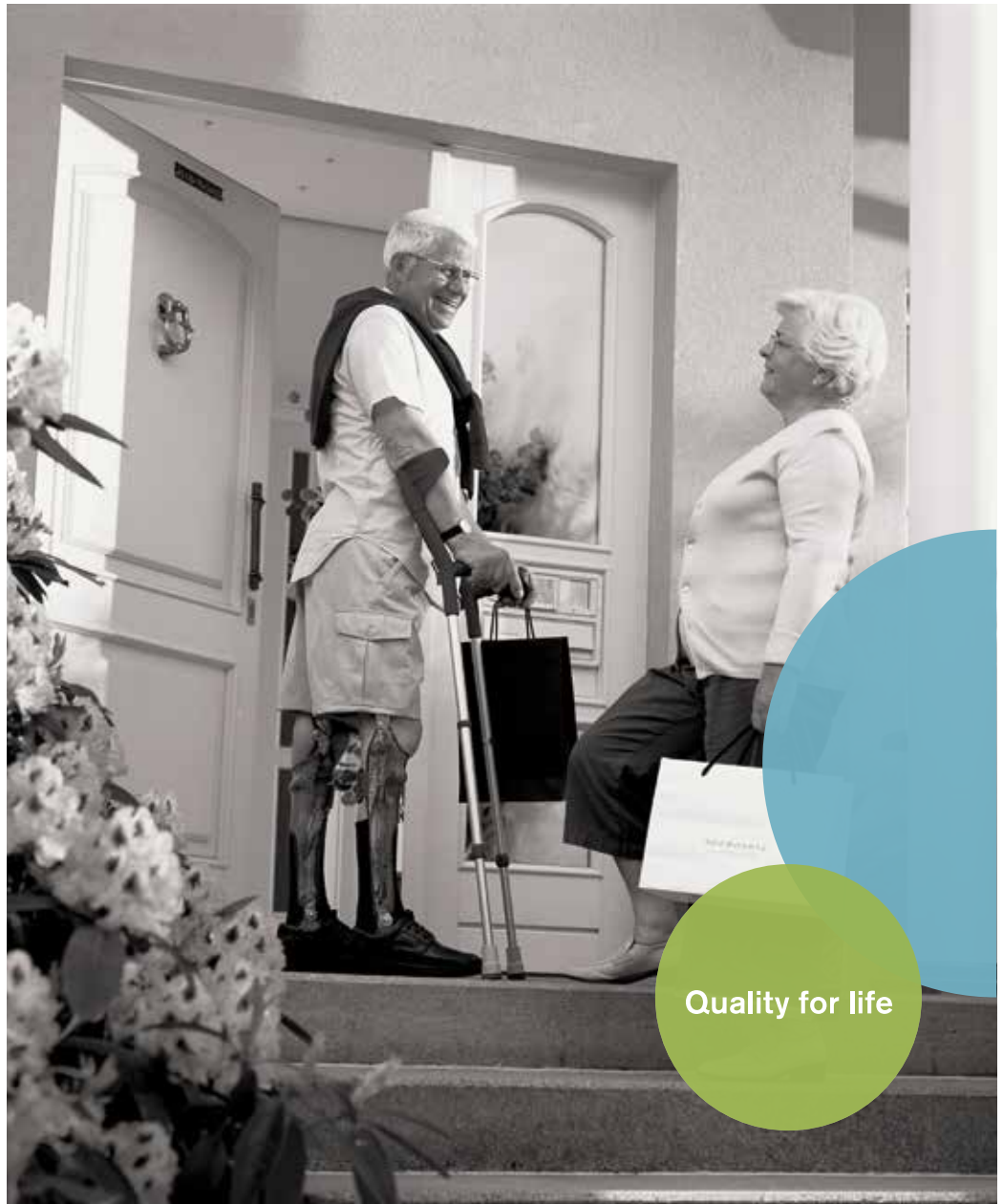


Quality for life

仕様および製品サイズ

17B23=K ベールロック膝継手

仕様

材質 : ステンレス製
サイズ : 16mm幅支柱用/20mm幅支柱用
屈曲可動域: 約105度
重さ : 約115g (片側)
長さ : 56mm (右図 a)、38mm (右図 b)
継手軸径 : 9mm
膝軸オフセット: 約7mm (右図 c)
付属品 : ケーブルリリース用ペルロンコード
モジュラー支柱固定用ネジ(8個)
圧縮コイルスプリング(2個)

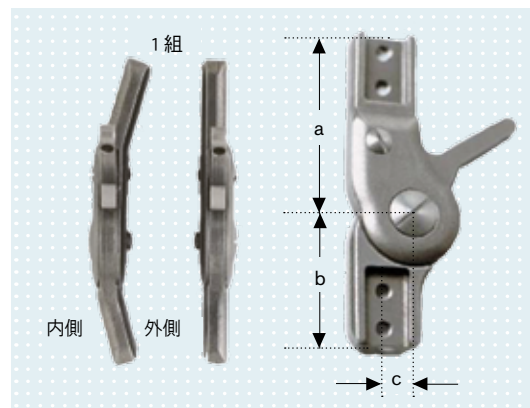

● モジュラー膝継手 ベールロック 17B23=K


- 本製品はモジュラーシステムの製品です。
膝継手には支柱は含まれていないため、下記よりお選びください。
- 支柱材はステンレス、アルミ、チタン材から選択することができます。
また、ラミネーション専用の支柱も取扱っております。詳しくは弊社までお問合せください。

製品サイズ

下記のサイズ表からお選び下さい。

発注品番		左右	支柱幅	完成用部品価格	
17B23=R16K		右	16 mm	34,300円	
17B23=L16K	モジュラー膝継手	左	16 mm	34,300円	
17B23=R20K	ベールロック(1組)	右	20 mm	35,700円	
17B23=L20K		左	20 mm	35,700円	

発注品番		厚み	支柱幅	大腿支柱長さ	下腿支柱長さ
17B39=16	アルミ支柱	5mm	16 mm	410 mm	450 mm
17B39=20	4本セット		20 mm		
17B38=16	ステンレス支柱	4mm	16 mm	410 mm	450 mm
17B38=20	4本セット		20 mm		
17B38=16-T	チタン支柱	4mm	16 mm	410 mm	450 mm
17B38=20-T	4本セット		20 mm		

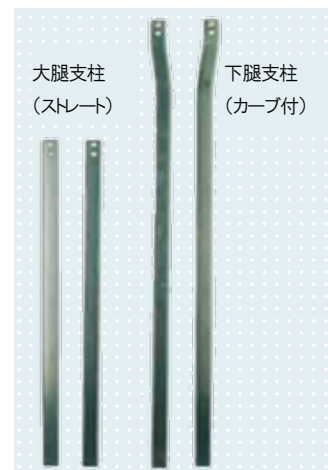

● 支柱4本セット

お問合せ先